



Enterella

SX-ELLA Stent Colorectal Enterella

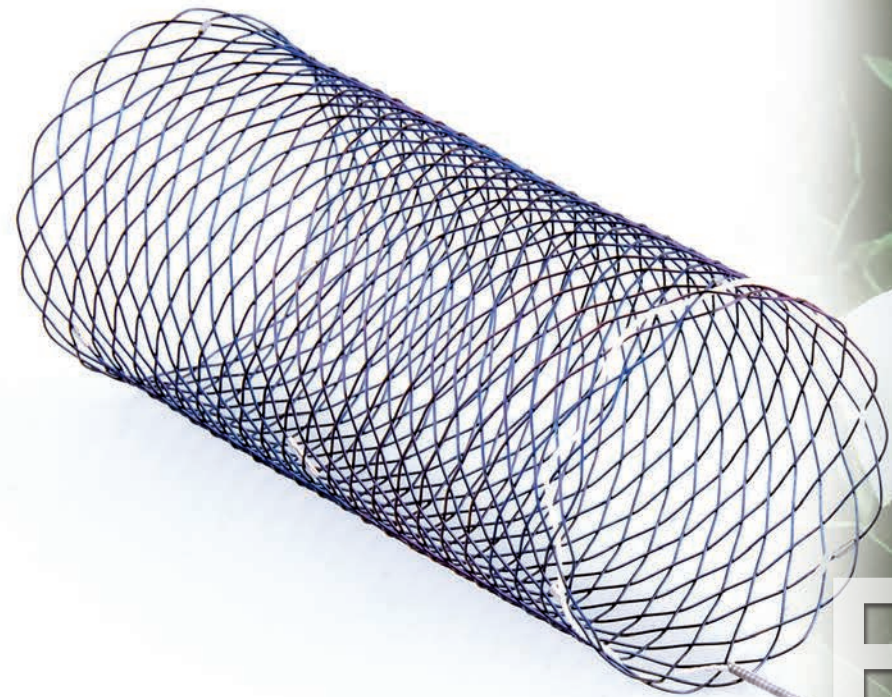

Enterella

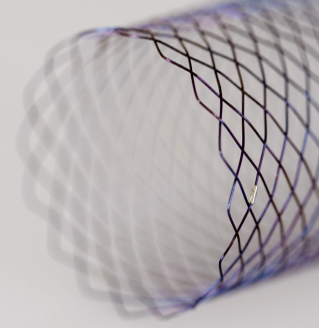

Fácil despliegue

Excelente flexibilidad

Extremos atraumáticos del stent

La alineación lisa alrededor de flexiones



Descripción básica

SX-ELLA Stent Colorectal – Enterella

Stent para la inserción bajo control fluoroscópico / endoscópico o una combinación de ambos
Stent auto-expandible de nitinol precargado en el sistema de entrega PULL

Indicaciones

Tratamiento paliativo de las obstrucciones o estenosis causadas por tumores malignos que afectan el recto, el colon sigmoide o la parte distal del colon descendente. Puede utilizarse para cerrar fistulas colointestinales o colovesiculares (stent recubierto).

Contraindicaciones

Perforación del intestino
Absceso peritoneal
Ascitis severa
Coagulopatía grave
Isquemia enteral


Características y beneficios

- ✓ Extremos del stent atraumáticos / efectiva prevención de trauma en la pared intestinal
- ✓ Excelente flexibilidad / alineación precisa en las curvas anatómicas
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos del stent y en el punto medio / mejor visibilidad, posicionamiento exacto del stent
- ✓ Lazo de plástico en el extremo proximal para el reposicionamiento del stent / posibilidad de reposición del stent dentro de los cinco días después de la implantación
- ✓ Cobertura opcional del stent / prevención del crecimiento del tumor y la oclusión de fistulas

Descripción adicional

15 F (5,08 mm) sistema de entrega disponible en una longitud estándar de 95 cm (135 cm sistema de entrega está disponible bajo petición, stent recubierto requiere 18 F (6,0 mm) sistema de entrega).
Radiopaco, punta atraumática del sistema de entrega.
Guía de cable recomendada: 0.035" (0,89 mm) ultra rígida.


Fácil despliegue

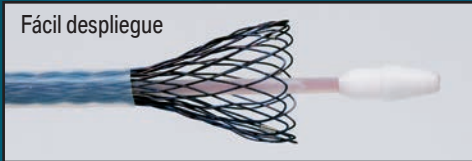

Medidas disponibles

REF No.	Diámetro (sin comprimir) nominal [mm]	Longitud (sin comprimir) nominal [mm]
019-05-22-082	22	82
019-05-22-090	22	90
019-05-22-113	22	113
019-05-22-135	22	135
019-05-25-082	25	82
019-05-25-090	25	90
019-05-25-113	25	113
019-05-25-135	25	135
019-05-30-075	30	75
019-05-30-088	30	88
019-05-30-112	30	112
019-05-30-123	30	123
019-05-30-136	30	136



Excelente flexibilidad

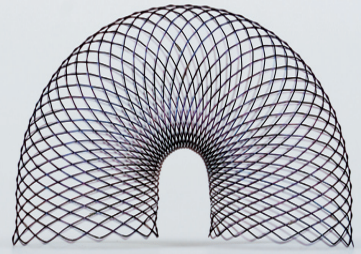

Lazo de plástico



Bordes atraumáticos

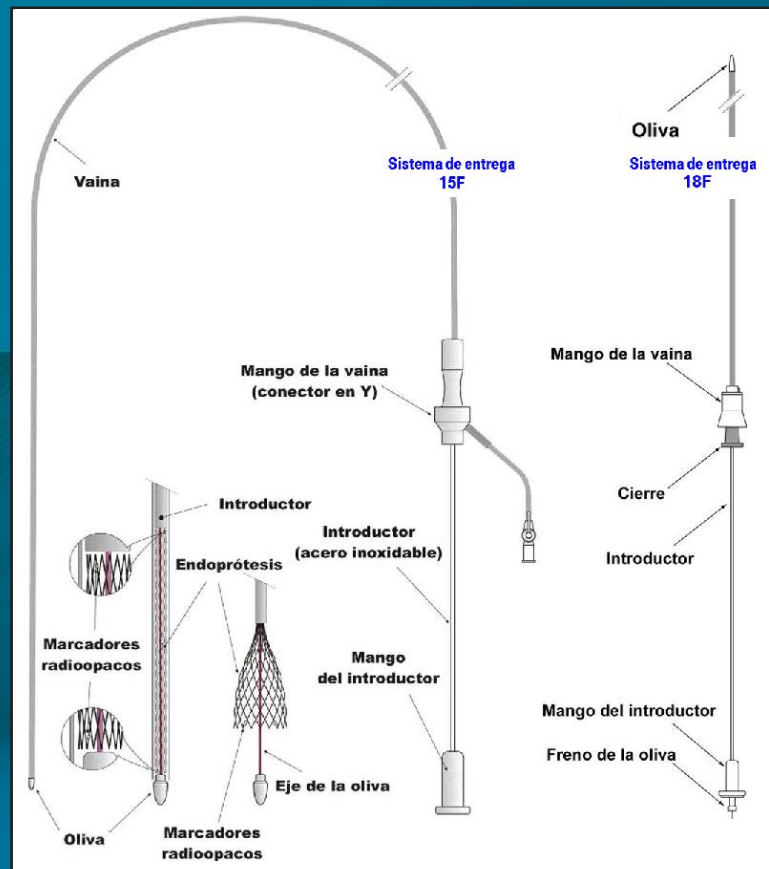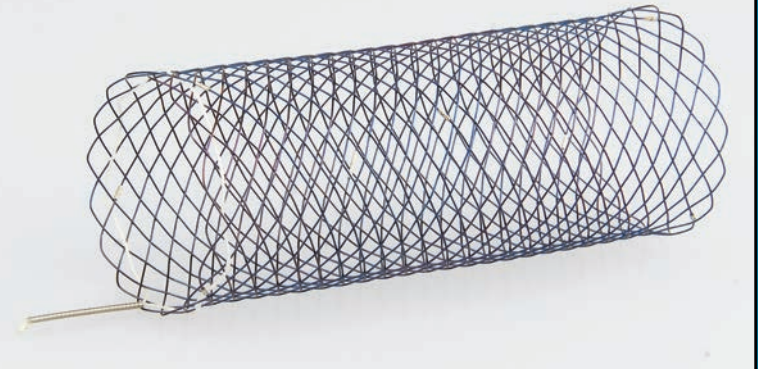

Distributor:

Manufacturer:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504, 500 06 Hradec Kralove
Czech Republic

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu